

# CHLORAXID 2% GEL

CE 2409

Přípravek k vyplachování kořenových kanálků

**PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD**  
VÝROBEK MOHOU POUŽÍVAT POUZE ZUBNÍ LÉKAŘI

**SLOŽENÍ:** chlornan sodný (obsah aktivního chloru 2%), čištěná voda, gelová báze.

## URČENÍ

Během mechanického rozšiřování kanálku odstraňuje zbytky odumřelé dřevě. Čistí kanálek, včetně odstranění sprašné vrstvy, aby před vyplněním kořenového kanálku došlo k odhalení vyústění zubovinových kanálků. Předchází změně barvy zubů, k níž by mohlo dojít po vyplnění nevypláchnutého kanálku. Gelová konzistence přípravku minimalizuje riziko protlačení přípravku hrotovým otvorem a zajišťuje velmi dobré zpracování během aplikace. CHLORAXID 2% GEL doporučujeme zejména k opracování kanálků s širokými, nepravidelnými nebo poškozenými hroty.

## ZPŮSOB POUŽITÍ

Přiložený aplikátor musíte před zahájením zákroku ponořit do lihu (etanolu), a následně nasadit na stříkačku. Přípravek CHLORAXID 2% GEL musíte při opracování kořenového kanálku nanést přímo do něj přiloženým aplikátorem nebo nanést přípravek na požadovaný nástroj. Opracujte kanálek, vypláchněte fyziologickým roztokem pomocí jehly s bočním otvorem. Proplachujte střídavě s EDTA. Postup několikrát opakujte. Přípravek je určený k opakovanému použití, aplikátor však slouží jen k jednorázovému použití. Při opakovaném použití aplikátoru hrozí riziko sekundární kontaminace.

## KONTRAINDIKACE

Nepoužívejte u pacientů s přecitlivělostí na složky přípravku.

**UPOZORNĚNÍ!** Během vyplachování kořenových kanálků, konkrétně mezi vyplachování chlornanem sodným a chlorhexidinem dihydrochloridem, používejte fyziologický roztok, který zabraňuje srážení hnědé usazeniny. Vydatně proplachujte.

## BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Dbejte maximální opatrnosti během používání u perforací. Může dráždit sliznice ústní dutiny, oči a kůži. V případě kontaktu okamžitě opláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. V případě požití nevyvolávejte zvracení. Vypijte velké množství vody. Vyhledejte lékařskou pomoc. Během práce s přípravkem používejte kofferdam. Používejte rukavice, ochranné brýle, ochranný oděv.

## SKLADOVÁNÍ

Skladujte v originálním obalu při teplotě 2–8 °C (v ledničce). Chraňte proti působení slunečního záření. Skladujte mimo dosah dětí. Doba použitelnosti je uvedena přímo na obalu. Pokud je obsah přípravku po každém použití těsně uzavřen, nedochází ke změně doby jeho použitelnosti.

## PŘEVOZ


Výrobce povoluje přepravu výrobku po dobu delší než 10 dnů při teplotě do 40 °C. Krátkodobý převoz v uvedeném rozpětí teplot nemá vliv na bezpečnost a účinnost působení výrobku po celou dobu jeho použitelnosti.

## NAKLÁDÁNÍ S OBALY OD VÝROBKU

Použitý obal musíte odevzdat k likvidaci nebo vrátit výrobci.

## DOSTUPNÁ BALENÍ

Stříkačka s obsahem 2 ml přípravku, sada jednorázových aplikátorů.

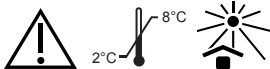

PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski  
37-450 Stalowa Wola, Polska  
ul. Kwiatkowskiego 1  
Tel/fax 0048 15 842-35-85