

NÁSTROJE NA PŘENÁŠENÍ A APLIKACI MTA+




PŘED POUŽITÍM SE SEZNAMTE S TÍMTO NÁVODEM
VÝROBEK JE URČEN VÝHRADNĚ K POUŽITÍ LÉKAŘEM STOMATOLOGEM

NESTERILNÍ VÝROBEK - STERILIZOVAT PŘÍMO PŘED POUŽITÍM

Stomatologický nástroj k opakovanému použití k přenášení a aplikaci dávky materiálu typu MTA+.

Nástroje vyrobené z vysoce legované nerezové oceli odolné vůči korozi, s vysokou odolností vůči prnutí (ohýbání, komprese), obsah C (uhlíku ve slitině) min. 0,15 %.

POPIS SADY

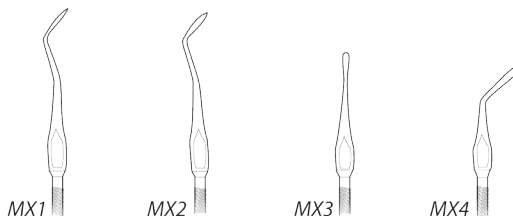

MX1- Koncovka na přenášení cementu MTA+ s matricí Matrix na zpracovaný kanálek, při uzavírání perforace, při reverzní výplni v zadních zubech.

MX2- Koncovka na přenášení cementu MTA+ s matricí Matrix na zpracovaný kanálek v případě uzavírání perforace, při reverzní výplni v předních zubech.

MX3 - Koncovka na přenášení cementu MTA+ s matricí Matrix v případě uzavírání perforace, reverzní výplně, ke kondenzaci, vyhlazování aplikovaného cementu v předních zubech.

MX4 - Koncovka na přenášení cementu MTA+ s matricí Matrix v případě uzavírání perforace, reverzní výplně, ke kondenzaci, vyhlazování aplikovaného cementu v zadních zubech.

ZACHÁZENÍ S NÁSTROJI Z NEREZOVÉ OCELI

Při procesu výroby byly uplatněny zákroky, které mají za cíl zajistit odolnost vůči korozi, ovšem životnost nástroje závisí na správném používání a údržbě.

Čištění, oplachování a mytí

Nástroje se dodávají v nesterilním stavu. Z výroby nové nástroje před první sterilizací, po vyjmutí z obalu, důkladně umyjte v teplé vodě s přísadkou detergentu.

Před každým použitím u dalšího pacienta musí být nástroj sterilizován.

Sterilizace

Všechny nástroje (k opakovanému použití) musí být dezinfikovány, umyty za účelem odstranění dezinfekčního prostředku a vysušeny předtím, než budou sterilizovány. Jako nejefektivnější a nejvýkonnější se doporučuje mytí ultrazvukem.


Doporučené metody sterilizace:

Metoda	Doporučená teplota a čas
Parní autokláv	121 °C, po 20 minut
Suchý vzduch	160 °C, 60 až 120 minut
Chemická sterilizace	132 °C, po 20 minut

Číslo šarže výrobku se nachází na obalu.

ZPŮSOB POUŽITÍ VÝROBKU

Do konzistence mokrého písku připravený cement MTA+ umístěte do příslušného zhloubení matrice Matrix MTA+. S pomocí vybrané koncovky vysuňte zformovanou dávku materiálu a aplikujte.

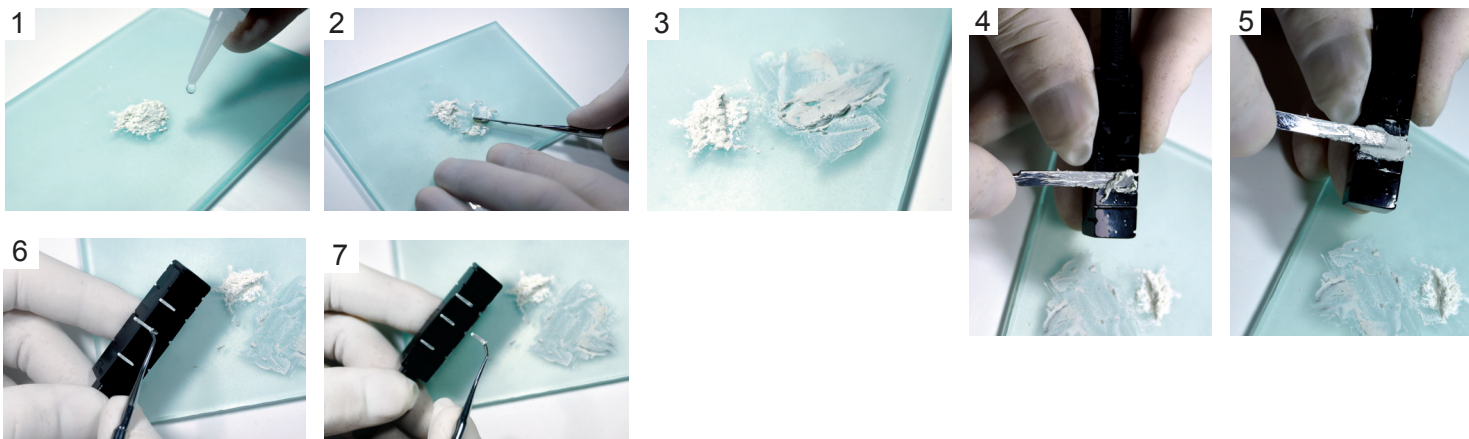

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Dodržte informace obsažené v návodu k používání výrobku MTA+ a pokyny o čištění a sterilizaci nástrojů.

SKLADOVÁNÍ

Nástroje skladujte při teplotě 5-30 °C a relativní vlhkosti nepřesahující 70 %.

Pokaždé před použitím nástroje zkontrolujte případné nečistoty, poškození struktury materiálu (praskliny, ohnutí, úlomky, loupání). Nedodržování výše uvedených pravidel výrazně zkracuje životnost nástroje a zkracuje čas jeho používání.



PODÍVEJTE SE DO NÁVODU K OBSLUZE



PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski
37-450 Stalowa Wola, Polska
ul. Kwiatkowskiego 1
Tel/fax 00 48 15 842 35 85