

# RUBBER-DAM cord



Stahovací gumička pro upevnění kofferdamu

**PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD**  
VÝROBEK MOHOU POUŽÍVAT POUZE ZUBNÍ LÉKAŘI

## POUŽITÍ

Gumičku zachyťte v mezizubním prostoru mezi odhaleným zubem a zubem zakrytým kofferdamem. K upevnění kofferdamu stačí gumička v délce 4 cm. Po upevnění můžete délku gumičky zkrátit nůžkami podle potřeby.

Zachycení gumičky v mezizubním prostoru usnadní použití vodou ředitelného lubrikantu.

## SKLADOVÁNÍ

Skladujte v originálním obalu při teplotě do 25 °C. Chraňte proti slunečnímu záření.

Po použití těsně uzavřete.

Skladujte mimo dosah dětí.

Doba použitelnosti je uvedena na obalu.

## VAROVÁNÍ

Výrobek obsahuje latex, který může vyvolávat alergickou reakci.


## NAKLÁDÁNÍ S OBALY OD VÝROBKU

Použitý obal musíte odevzdat k likvidaci nebo vrátit výrobci.

## OBSAH

Dávkovač s gumičkou v délce 1,2 m.

Dostupné varianty: tenká, střední, silná

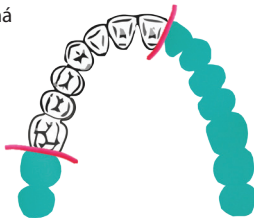

PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski  
37-450 Stalowa Wola, Polska  
ul. Kwiatkowskiego 1  
Tel/fax 0048 15 842-35-85

Datum poslední aktualizace: 30.08.2017/1